

KLASISKAIS CŪKU MĒRIS

Paraugi laboratoriskajiem izmeklējumiem

Paraugu noņemšana, iesaiņošana, pārvadāšana

- Veicot dzīvnieku sekciju un/vai noņemot paraugus stingri **ievērot biodrošības pasākumus** un nepiesārņot vidi!
- Ņemot orgānu paraugus, izvairīties no to kontaminācijas ar apkārtējās vides mikrofloru.
- Katrs paraugs jāiesaiņo vienreizlietojamā, noslēdzamā un marķētā trauciņā vai maisiņā.
- Uzglabā un transportē ūdens necaurlaidīgā konteinerā, temperatūrā +4°C (Nesasaldēt)!
- Uz laboratoriju nogādāt pēc iespējas īsākā laikā!




Laboratoriskai diagnostikai nosūtāmais paraugs – KCM vīrusa antigēna vai antivielu noteikšanai

- 1) Asins paraugs – nomedītam dzīvniekam asinis ņem no sirds, sirds somiņas vai pārgriežot jūga vēnu (*v.jugularis*) – kakla abās pusēs. Asins paraugam izmanto vienreizlietojamus konteinerus (trauciņus). Paraugam jāņem ne mazāk kā 50 - 80 ml nesarecējušu asiņu (šķidro frakciju).
- 2) Iekšējo orgānu paraugi no kritušām vai nomedītām meža cūkām – **mandeles, liesa (1/3), nieres (1/3), apzarņu limfmezgli** vai, ja līķis sadalīšanās stadijā - stobra kauls un krūšu kauls. Paraugu iesaiņo vienreizlietojamā un noslēdzamā trauciņā vai maisiņā.

Nesūtīt – plaušas, sirdi, aknas u.c. orgānus!!!

Ja nošautajam dzīvniekam konstatētas KCM raksturīgās pazīmes, dzīvnieka liemeni un iekšējos orgānus pēc paraugu noņemšanas sadedzināt un apkārtni dezinficēt!!!

Mandeleles

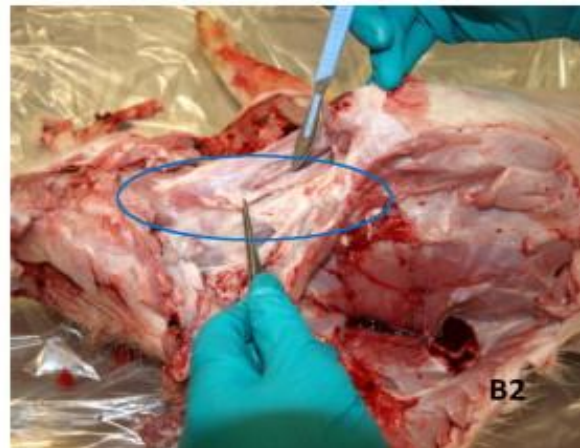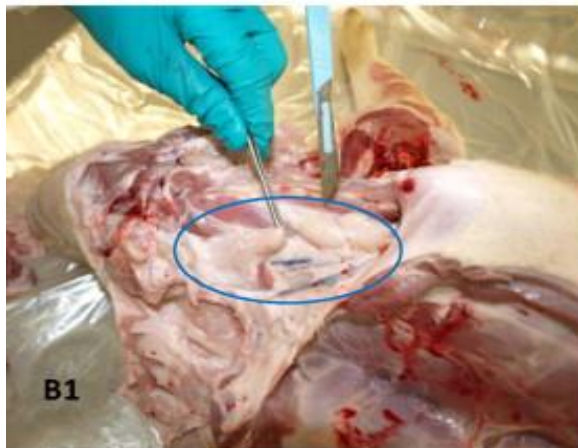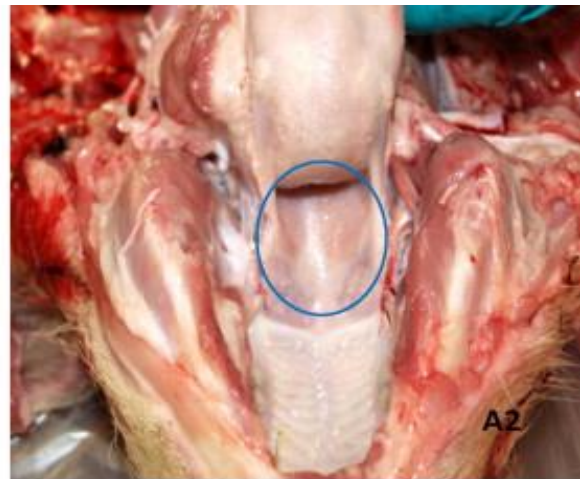

Limfmezgali



Nieres



Liesa

